

泡沫压缩测试仪

型号：F0028

IDM[®]
instruments

IDM 公司设计的泡沫压缩测试仪用来测定聚氨酯泡沫的变形力。该机器可根据 ASTM, ISO, AS, BS, 等国际通用标准, 进行常见的蜂窝聚氨酯材料的 ILD 或 IF D 测试。

该设备使用 IDM 公司自行研发的万能试验机测试软件, 该软件功能强大, 可以对试验数据进行编程。用户可以根据标准要求多种测试, 最终得到实验结果。实验过程试验完全自动化。

在实验开始前, 操作者需要在配置面板中输入一些相关的试验参数, 如测设类型, 试样数量, 试样尺寸, 参考标准。这些参数将应用到后期的数据统计中。

开始试验后, 整个过程完全是自动化的。点击“开始”按钮, 激活试验, 实验结果将实时显示在电脑端的测试软件上。得到结果后, 用户可以保存或打印出来。



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话: 010-67086989
传真: 010-67085997
邮箱: idm@laryee.com
网站: www.idminstruments.cn

泡沫压缩测试仪

型号：F0028

IDM[®]
instruments



产品应用：

- 聚氨酯泡沫
- 乳胶泡沫
- 橡胶泡沫
- 地毯衬垫
- 其他泡沫制品

选配附件：

- 可转动压盘：322±2cm² (8")
- 固定压盘：322±2cm² (8")
- 根据客户要求定制的压盘辅具
- 根据客户要求定制的压头
- 传感器
- 测试区域宽度：450mm
750mm
1000mm

(请报价时按需求指定选配附件)

产品特点：

- 力值加载系统-闭环电脑控制, 通过滚珠丝杠精确传动
- 测试范围：0-2224N
- 行程：200mm
- 速度：1-500mm/min
- 回程速度：500mm/min
- 速度精度：0.5%
- 力值自动清零
- 过载保护功能
- 限位开关保护功能
- 压盘尺寸：400*400mm
- 322±2 平方厘米压头
- 测试区域宽度为 500mm, 前后空间无限制


澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn

泡沫压缩测试仪

型号：F0028

IDM[®]

instruments

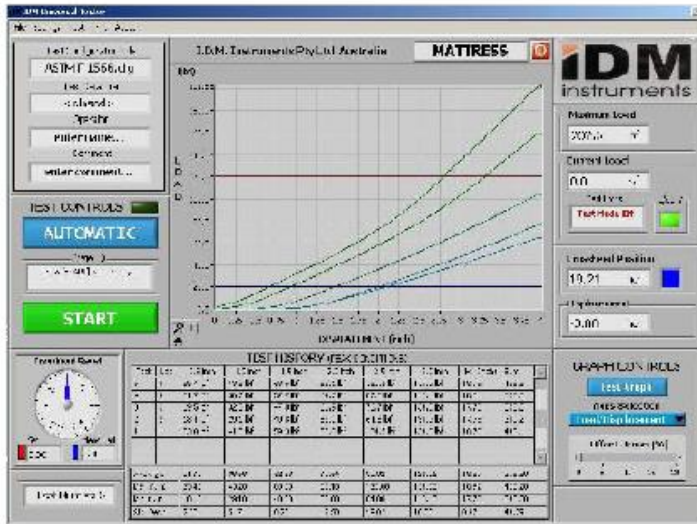

软件特点：

- 数据采集可调 1-200000Hz
- 位置或力值控制
- 测试数据可以同步显示在图表上
- 实时数据显示
- 可以选择图表段
- 数据可以显示在 Excel 上
- 超出设定范围自动停止
- 程序设定后，测试可以自动返回
- 根据标定文档标定机器
- 具有数据统计功能
- 可以打印测试报告
- 测试软件在 Windows 系统下操作
- 可以编辑测试标准
- 可以进行循环试验

参考标准：

- AS 2282. 8
- AS 2281
- ASTM D3574
- ISO 2439： 1997
- ISO 3386： 1984
- GB/T 10807
- JIS K6400

连接：

尺寸：

北京代表处
瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn