

# 恒变形静态压力夹具

型号：F0027




该恒变形静态压缩夹具设计用视觉评估压头力变形（IFD）损失，厚度损失等。该夹具有两块平行的夹板构成，试验中，把试样放在夹板中间。把试样压缩到原来厚度的 75%。

## 产品应用：

- 柔性泡沫聚氨酯

## 产品特点：

- 压盘尺寸：500\*500mm
- 测试区域尺寸：380\*380mm

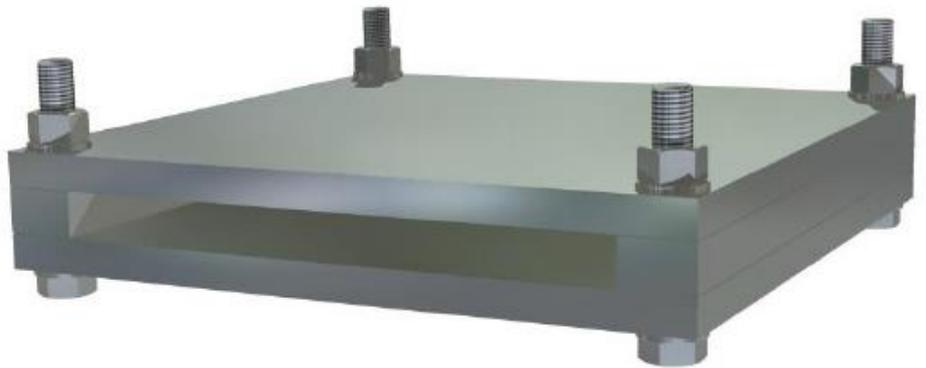

## 参考标准：

- ASTM D3574-Test 1
- JIS K6400

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处  
北京蓝瑞泰克科技有限公司  
电话：010-67086989  
传真：010-67085997  
邮箱：idm@laryee.com  
网站：www.idminstruments.cn